


NSK

CREATE IT.

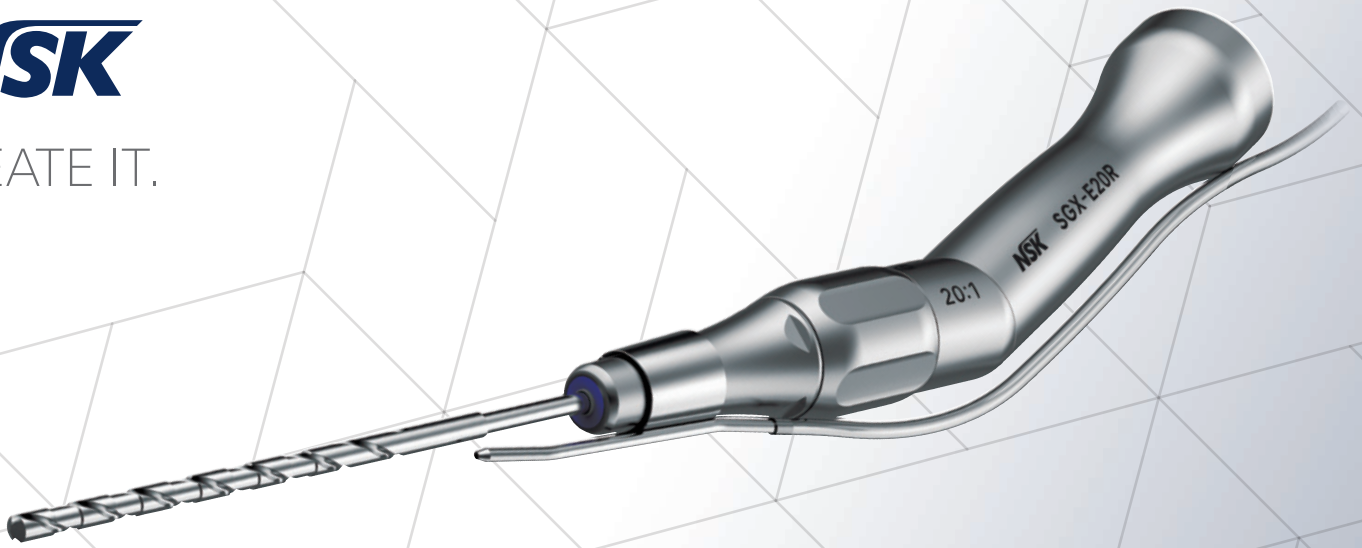

SGX-E20R

PIÈCE À MAIN POUR IMPLANTS ZYGOMATIQUES

La solution simple et efficace pour les implants zygomatiques

Le SGX-E20R vous permet de poser des implants zygomatiques, plus facilement et efficacement. L'angulation unique de la pièce à main a été spécialement conçue pour la pose des implants en secteur zygomatique. Le système d'étanchéité spécifique NSK, à la tête de l'instrument, prévient la contamination interne de la pièce à main. L'entretien est simplifié grâce à sa surface entièrement lisse.

Une angulation optimale pour les implants zygomatiques.


En comparaison avec les contre-angles de chirurgie classique, le SGX-E20R possède une angulation du corps pensée pour optimiser l'accès à l'os zygomatique, ce qui permet d'améliorer la visibilité lors du traitement.





Une irrigation externe efficace

La bague d'irrigation externe du SGX-E20R permet de refroidir la zone opératoire et la fraise.

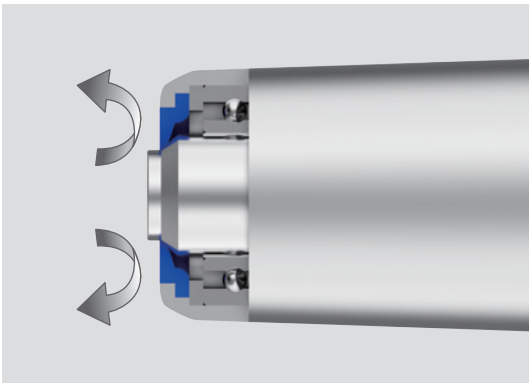

Un système d'étanchéité efficace

Ce système d'étanchéité NSK au niveau de la tête de l'instrument permet d'éviter la contamination interne de l'instrument, facilite son entretien et prolonge sa durée de vie.

Réduction 20:1

Non-lumière Modèle: **SGX-E20R** Référence : **HA1200**

- Corps en acier inoxydable ● Vitesse max. : 2,000 min⁻¹
- Torque max. : 50 Ncm ● Griffe ¼ de tour ● Pièce à main angulée
- Irrigation externe ● Pour les ostéotomies/ poses d'implants zygomatiques pour chirurgie maxillo-faciale/ chirurgie orale



Lavable en thermodésinfecteur



Autoclavable

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan TEL: +81 289 64 3380 FAX: +81 289 62 5636

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn, Germany
TEL: +49 6196 776060
FAX: +49 6196 7760629

NSK France S.A.S.

32 rue de Lisbonne
75008 Paris, France
TEL: +33 1 56 79 59 80
FAX: +33 1 56 79 59 81

NSK United Kingdom Ltd.

Office 4, Gateway 1000, Arlington Business Park
Whittle Way, Stevenage, SG1 2FP, UK
TEL: +44 1438 310670
FAX: +44 1438 310671

NSK Dental Spain S.A.

C/Módena, 43 El Soho-Európolis
28232 Las Rozas de Madrid, Spain
TEL: +34 91 626 61 28
FAX: +34 91 626 61 32

NSK Dental Italy S.r.l.

Via dell'Agricoltura 21
36016 Thiene VI, Italy
TEL: +39 0445 820070
EMAIL: info@nsk-italy.it